

## Aan het afnameventiel

# DEBIETMETER met voorgekalibreerde openingen *SELECTAFLO*



**1**  
*SELECTAFLO*  
zuurstof 0-6 l/min  
12 x 125  
met uitgangsnippel

### ► Zeer stabiele debietwaarden

- Dankzij een ingebouwd expansiesysteem, ongeacht de druk hogerop het netwerk en de tegendruk stroomafwaarts, voortgebracht door de verbindingstukken. Nieuw product van Air Liquide Medical.

### ► Therapeutisch prestatievermogen

- Veel debietbereiken mogelijk
- Systeem voor het vergrendelen van de debietwaarde; voorkomt wijzigingen door onachtzaamheid
- Systeem voorgekalibreerde openingen, wat een optimaal debiet in alle standen verzekert.

### ► Gebruiksvriendelijk

- Onmiddellijke aflezing op de voorkant, van het geleverde debiet
- Makkelijk te hanteren, te regelen en te reinigen dankzij een uitgekend design, wat een betere hygiëne waarborgt
- Een specifieke toevoeraansluiting voor elk gas
- Geleverd met bijhorende uitgangsnippel voor aansluiting op de leidingen voor zuurstoftherapie

Functie	Hygiëne
<p>► <b>Debietmeter met voorgekalibreerde openingen (met cilinder) waarmee het debiet van een gas kan worden geregeld en gemeten vanaf een afnameventiel.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reiniging : met zeepsop</li> <li>• Spoeling : met zuiver water</li> <li>• Ontsmetting :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- met een oplossing op basis van alcohol (spray of doekjes)</li> <li>- met een oplossing met CE-merk (type Surfanios®, Hexanios GR®, ...)</li> </ul> </li> <li>• <b>OPGELET</b> : geen schuurmiddelen gebruiken (in poedervorm of andere), de debietmeter niet onderdompelen</li> </ul>
Karakteristieken	Onderhoud en veiligheid
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beschikbare gassen : zuurstof - medische lucht</li> <li>• Toevoerdruk : 2 tot 6 bar</li> <li>• Beschikbare debietbereiken :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>0 - 3 l/min. (0 - 0,25 - 0,5 - 0,75 - 1 - 1,25 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3) (enkel voor zuurstof)</li> <li>0 - 6 l/min. (0 - 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6)</li> <li>0 - 15 l/min. (0 - 1 - 1,5 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9 - 12 - 15)</li> </ul> </li> <li>• Gewicht : 395 g</li> <li>• Afmetingen : (l) 98 mm x (b) 50 mm x (h) 80 mm</li> <li>• Markering CE 0120 Klasse IIa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jaarlijkse controle van de debietwaarden</li> <li>• Preventief onderhoud om de 5 jaar</li> </ul>




**2**

Referenties	Omschrijving
<b>34301</b>	<b>SELECTAFLO zuurstof • 0-3 l/min 12 x 125 met uitgangsnippel</b>
<b>34296</b>	<b>SELECTAFLO zuurstof • 0-6 l/min 12 x 125 met uitgangsnippel</b> <span style="float: right;"><b>1</b></span>
<b>34294</b>	<b>SELECTAFLO zuurstof • 0-15 l/min 12 x 125 met uitgangsnippel</b>
<b>34300</b>	<b>SELECTAFLO medische lucht • 0-6 l/min 12 x 125 met uitgangsnippel</b>
<b>34295</b>	<b>SELECTAFLO medische lucht • 0-15 l/min 12 x 125 met uitgangsnippel</b> <span style="float: right;"><b>2</b></span>
Verbruiksartikelen	
<b>343800</b>	<b>met uitgangsnippel 12 x 125 (met dichting) per partij van 10</b>
<b>35345</b>	<b>Aansluiting 9/16" voor koppeling van de bevochtiger volgens de Engelse normen</b>



*SELECTAFLO*  
zuurstof met  
bevochtiger en  
zuurstoftherapiebril

# DEBIETMETER MET VOORGEKALIBREERDE OPENINGEN **SELECTAFLO**

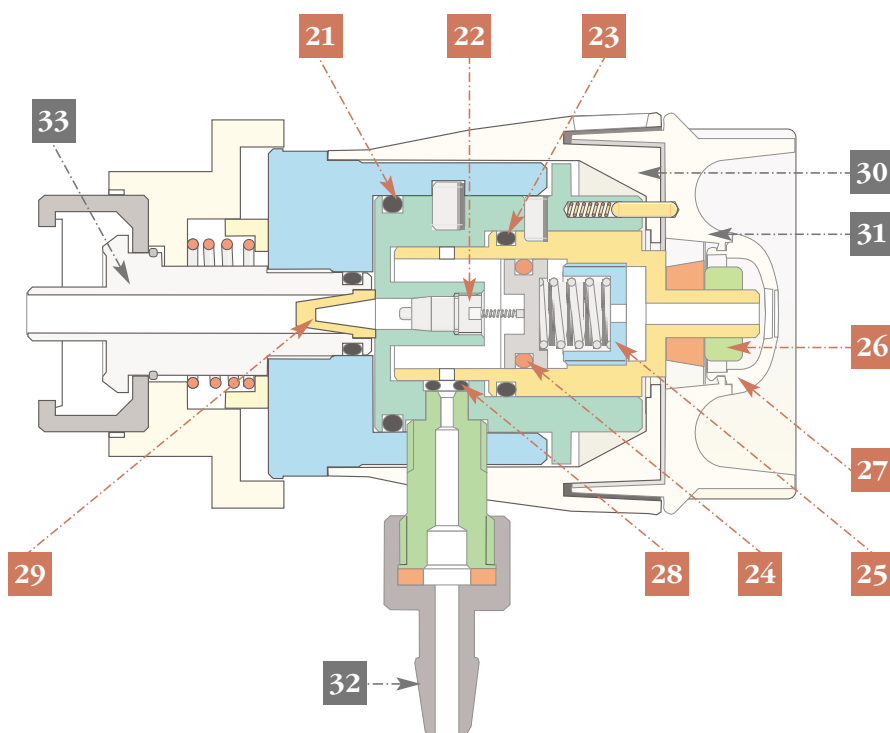

Referenties	Benaming	
<b>Kit 37513</b>	Dichtingsring R19 bis	21
	Klep	22
	Dichtingsring 17 x 2	23
	Dichtingsring 10 x 2	24
	Afstelschroef	25
	Roestvrije moer Nylstop	26
	Moerafdekplaatje	27
	Dichtingsring R00	28
	Kegelvormige filter	29
<b>37496</b>	Gemerkte mof 0-15 L/min (x 5)	30
<b>CX080400</b>	Gemerkte mof 0-6 L/min (x 5)	30
<b>34367</b>	Gemerkte bedieningsknop 0-15 L/min (x 5)	31
<b>43467</b>	Gemerkte bedieningsknop 0-6 L/min (x 5)	
<b>34380</b>	Uitgangsnippel + dichting 12 x 125 (x 10)	32
<b>34379</b>	Uitgangsnippel + dichting 9/16" (x 10)	
<b>37390</b>	Volledige toevoeraansluiting AFNOR O <sub>2</sub>	33
<b>40823</b>	Volledige toevoeraansluiting AFNOR Air	